



Товары медицинского назначения
2021

dr-frei.com

Наша миссия в качестве международной компании - обеспечить партнеров инновационной и высококачественной продукцией медицинского назначения, предназначенной для укрепления и поддержания здоровья и здорового образа жизни.

Наша цель - продолжать укреплять позицию лидера международного уровня в разработке, продвижении и глобальной дистрибуции медицинских брендов премиум класса.

Бренд Dr.Frei включает продукцию, которая удовлетворяет потребности покупателей в медицинских приборах для домашнего и профессионального использования.

Категория	Продукт
Контроль артериального давления	Электронные тонометры, механические измерители артериального давления, стетоскопы
Контроль уровня кислорода	Пульсоксиметр
Контроль температуры	Цифровые термометры
Контроль и лечение органов дыхания	Небулайзеры
Товары для детей	Молокоотсосы



СЕРТИФИКАТЫ

3



EC Certificate - Full Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II excluding Section 4


No. **CE 662931**
Issued To: **FreiCare Swiss AG**
Seepark 6
Staad
9422
Switzerland

In respect of:

Design and manufacture of blood pressure monitors. Those aspects of Annex II related to metrology in the design and manufacture of aneroid blood pressure kits.

on the basis of our examination of the quality assurance system under the requirements of Council Directive 93/42/EEC, Annex II excluding section 4. The quality assurance system meets the requirements of the directive. For the placing on the market of class III products an Annex II section 4 certificate is required.

For and on behalf of BSI, a Notified Body for the above Directive (Notified Body Number 0086):

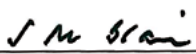
Stewart Brain, Head of Compliance & Risk -
Medical Devices

First Issued: **2017-08-21**

Date: **2017-08-21**

Expiry Date: **2022-08-20**

...making excellence a habit™

Page 1 of 1

Validity of this certificate is conditional on the quality system being maintained to the requirements of the Directive as demonstrated through the required surveillance activities of the Notified Body. This approval excludes all products designed and/or manufactured by a third party on behalf of the company.
Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A member of BSI Group of Companies.



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - EN ISO 13485:2016

This is to certify that:

FreiCare Swiss AG
Seepark 6
Staad
9422
Switzerland

Holds Certificate Number: **MD 662932**

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of EN ISO 13485:2016 for the following scope:

Design, manufacture, sales and distribution of Blood pressure monitors, Aneroid Blood pressure kits, Thermometers, Nebulizers, Condoms, Stethoscopes, Sticks, Axillary Crutches, Elbow Crutches, Walkers, Plasters, Orthopedic supports and Elastic bandages, Lubricants, Breast Pads, Adult Diapers, Bed Underpads.

For and on behalf of BSI:


Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Original Registration Date: 13/03/2017

Latest Revision Date: 13/03/2017

Effective Date: 13/03/2017

Expiry Date: 12/03/2020

Page: 1 of 1



...making excellence a habit™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsigroup.com/ClientDirectory).
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

4



Технология CAM - клинически точное измерение

Позволяет получить максимально точные результаты измерений артериального давления в домашних условиях.

В режиме CAM прибор автоматически выполняет два последовательных измерения с 20-секундным интервалом. Затем прибор анализирует полученные данные и отображает значение на дисплее. Если разница между первым значением систолического давления и вторым больше или равна 15 мм рт.ст., а разница между первым значением диастолического давления и вторым больше или равна 10 мм рт.ст., то автоматически будет произведено третье измерение. Если частота пульса при первом и/или втором измерениях меньше или равна 60 уд/мин., прибор автоматически произведет четвертое измерение. Поскольку артериальное давление постоянно колеблется, результат, полученный в данном режиме, более надежный, чем результат, полученный при однократном измерении.



КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА



IHB - определение нарушений сердечного ритма

Усовершенствованная технология обнаружения нерегулярного сердцебиения. Эта технология позволяет выявить различные нарушения сердечного ритма, включая наиболее опасное из них - мерцательную аритмию.



Индикатор уровня артериального давления

Индикатор уровня артериального давления позволяет пользователю самостоятельно ориентироваться в том, насколько опасно измеренное давление. Индикатор уровня давления, соответствующий стандартам ESH (Европейского Общества по артериальной гипертензии), расположен вдоль левого края дисплея.



Функция определения среднего значения всех сохраненных результатов

Известно, что сердечные приступы и инфаркты чаще случаются в утренние часы. Вариации в показателях утреннего и вечернего артериального давления необходимы врачам для лучшего понимания, диагностики и лечения гипертонии.



Режим накачивания манжеты iLogic

Интеллектуальная технология измерения уровня давления при накачивании автоматически определяет необходимый уровень накачивания манжеты, обеспечивает более быстрые результаты с наименьшим дискомфортом для пользователя.

КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОНОМЕТРЫ



M-300A



модель	М-300А
тип	автомат на плечо
диагностика аритмии	+
CAM технология (клинически точное измерение)	+
iLogic технология	интеллектуальная технология измерения при накачивании
среднее значение	все сохраненные значения
индикатор уровня артериального давления	+
память	90
часы	+
манжета	22-42 см
сумка	+
использование адаптера (micro USB)	+
гарантия	5 лет

КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОНОМЕТРЫ

7



М-200А



М-100А



М-150S



КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОНОМЕТРЫ

8

модель	M-200A	M-100A	M-150S
тип	автомат на плечо	автомат на плечо	полуавтомат на плечо
диагностика аритмии	+	+	+
среднее значение трех последних измерений	+	-	-
индикатор уровня артериального давления	+	+	+
память	2 x 30	1	1
манжета	M-L (22-42 см)	M (22-32 см)	M (22-32 см)
сумка	+	+	+
адаптер	+	+	-
гарантия	5 лет	5 лет	5 лет


КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ТОНОМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ


9



A-10
Professional

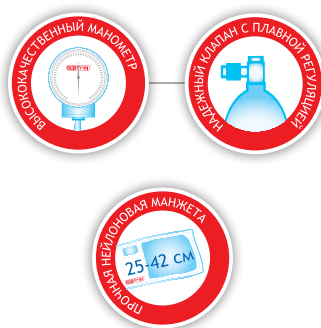

A-20
Classic

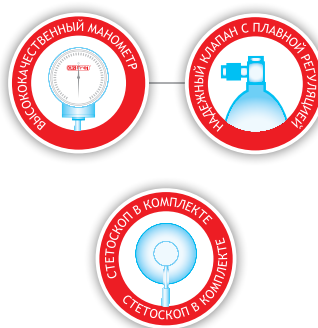

A-40
Comfort



КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ТОНОМЕТРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

10

модель	A-10	A-20	A-40
механический измеритель АД	Профессионал	Классик	Комфорт
сфигмоманометр	бериллиево-цинковый механизм	бериллиево-цинковый механизм	бериллиево-цинковый механизм
манжета	профессиональная 25 - 42 см	комфорт 22 - 36 см с фиксирующим кольцом	комфорт 22 - 36 см с фиксирующим кольцом
стетоскоп		+	встроенная головка стетоскопа
сумка	+	+	+
гарантия	2 года	2 года	2 года

КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

СТЕТОСКОПЫ

11



S-10



S-20



S-30

модель	S-10	S-20	S-30
тип стетоскопа	односторонняя головка	двусторонняя головка	раппапорт
ушные оливы	эргономичные	эргономичные	3 запасные пары различной формы
головка стетоскопа	облегченная алюминиевая	облегченная алюминиевая	3 сменные воронки 2 запасные прозрачные пластиковые мембраны
бинауральная трубка	прочная хромированная	прочная хромированная	прочная хромированная
«Y» трубка	цельнолитая PVC	цельнолитая PVC	отдельная труба от головки к каждому из слуховодов обеспечивает отличную акустику
гарантия	2 года	2 года	2 года

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КИСЛОРОДА

ПУЛЬСОКСИМЕТР: ТОЧЕЧНАЯ ПРОВЕРКА НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ АРТЕРИАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБИНА (SpO_2), ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА



AS-304-L



модель	AS-304-L
Время измерения	3-4 с
Место измерения	кончик пальца
Результаты измерения	насыщение кислородом, пульс
Тип измерения	неинвазивный
Цикл обновления дисплея	не более 12 с
Индикатор реального времени на ЖКД	гистограмма
Беспрерывное использование батареи	12 часов
Устойчивость к влиянию окружающего света	+
Автоматическое выключение	+
Гарантия	2 года

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕРМОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

13



T-10



T-20



T-30



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕРМОМЕТРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

14

модель	T-10	T-20	T-30
время измерения	60 секунд	20 секунд	20 секунд
водостойкость	к водяным брызгам	к сильным струям воды	к водяным брызгам
гибкий кончик	-	+	+
сигнал о повышенной температуре	+	+	+
память	последнее значение	последнее значение	последнее значение
автоматическое выключение	+	+	+
гарантия	2 года	2 года	2 года

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

15



MI-100



MI-200



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

16


модель	MI-100	MI-200
время измерения	1 second	<2 секунд
место измерения	лоб, ухо, объект, воздух	лоб, объект
бесконтактное измерение	контактное	бесконтактное <2,5 см
сигнал о температуре	цветовая индикация	-
единицы измерения	°C / °F	°C / °F
подсветка экрана	+	+
память	20 последних результатов	6 последних результатов
гарантия	2 года	2 года

КОНТРОЛЬ И ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Ингаляционная терапия — самый эффективный способ лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы. Небулайзер обеспечивает глубокое проникновение препаратов непосредственно в место воспаления с возможностью доставки высоких доз лекарственного вещества.

Распределение частиц аэрозоля в дыхательных путях

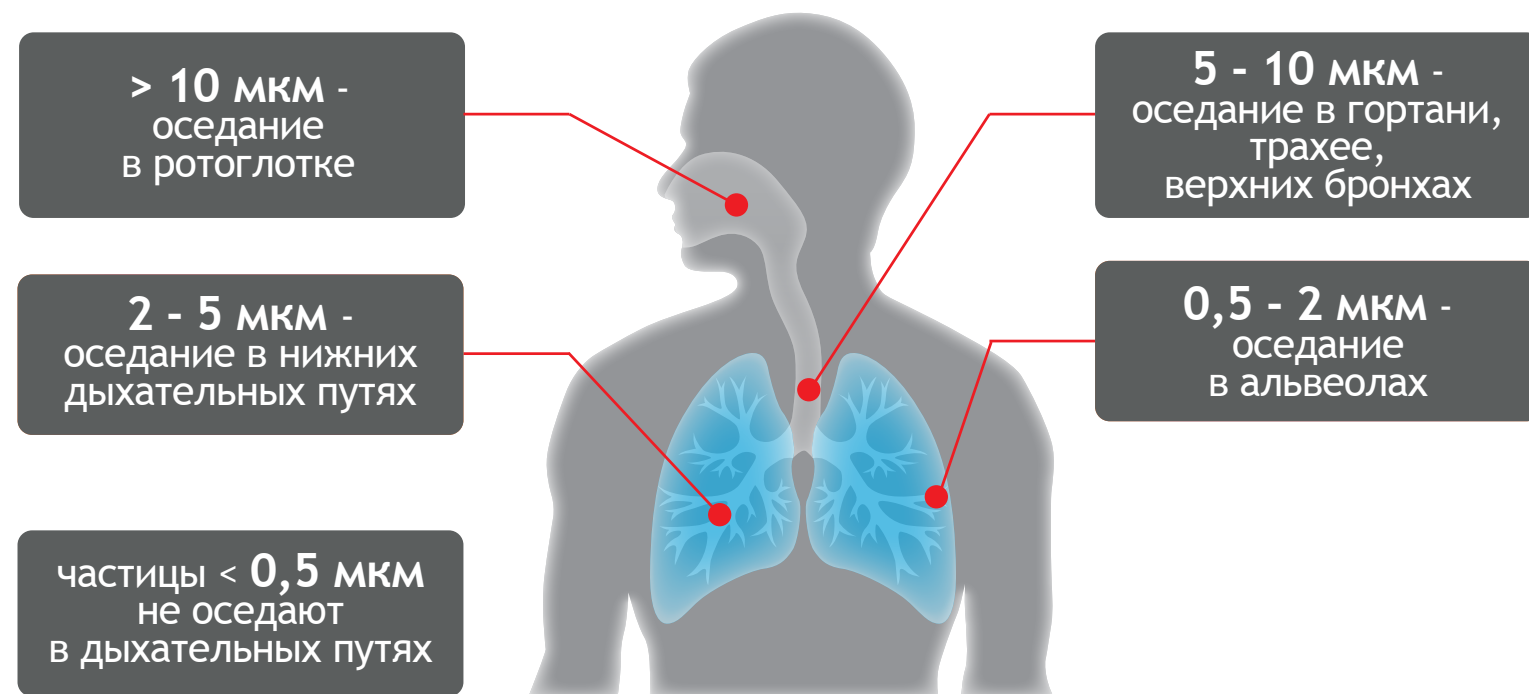

КОНТРОЛЬ И ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

18



APS технология



Технология регулирования размера частиц позволяет генерировать аэрозоль с различным размером частиц для эффективного лечения верхних и нижних дыхательных путей.

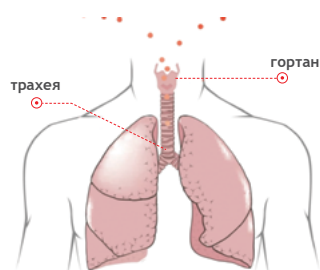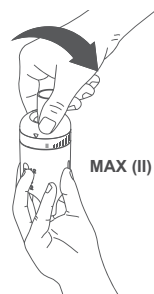

Поверните крышку распылителя в положение **MAX**. В этом положении размер частиц аэрозоля составляет 6 микрон.

Режим **MAX** используется для лечения:

- ОРЗ
- ОРВИ
- фарингитов
- ларингитов

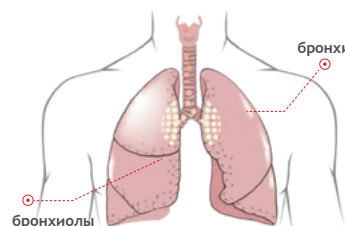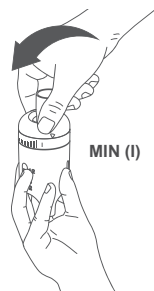

Поверните крышку распылителя в положение **MIN**. В этом положении размер частиц аэрозоля составляет 3 микрона.

Режим **MIN** используется для лечения:

- бронхитов
- бронхиальной астмы

КОНТРОЛЬ И ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

19



Быстрое распыление

Быстрое распыление минимализирует продолжительность процедуры и делает ее более комфортной.




Минимальный остаточный объем

Минимальный остаточный объем повышает эффективность лечения и позволяет экономно расходовать лекарственные средства.



Низкий уровень шума

Уровень шума менее 55 децибел - важная характеристика, в частности при лечении маленьких детей, которые боятся шума.

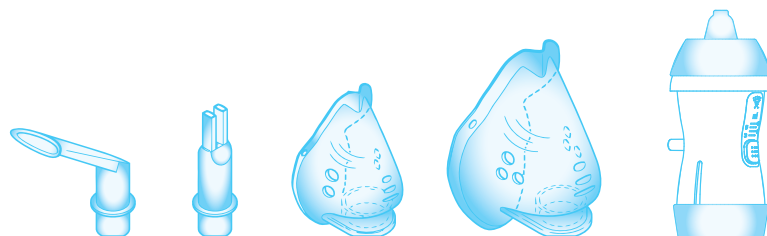

Набор аксессуаров для всей семьи

Загубник, насадка для носа, маска детская, маска для взрослого.

Насадка для промывания носа

Насадка для промывания носа предназначена для очистки полости носа и лечения насморка и хронических ринитов как у взрослых, так и у детей.

КОНТРОЛЬ И ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

НЕБУЛАЙЗЕРЫ КОМПРЕССОРНЫЕ

20

для интенсивного
использования



TURBO MINI



для всей
семьи



TURBO BASE



SMART
РАЗМЕР



TURBO LEX



КОНТРОЛЬ И ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

НЕБУЛАЙЗЕРЫ КОМПРЕССОРНЫЕ

21

модель	Turbo Mini	Turbo Base	Turbo Lex
тип	компрессорный	компрессорный	компрессорный, DC
скорость распыления	от 0.2 до 0.4 мл/мин	≥ 0.25 мл/мин	≥ 0.24 мл/мин
размер частиц (MMAD)	3-6 мкм с регулировкой MMAD (APS-Technology)	3 мкм	<5 мкм
возможность распыления антибактериальных и гормональных препаратов	+	+	+
объем емкости для медикамента	2 - 12 мл	10 мл	8 мл
очистка и дезинфекция	кипячение и/или замачивание в дезинфектанте, согласно инструкции	кипячение и/или замачивание в дезинфектанте, согласно инструкции	кипячение и/или замачивание в дезинфектанте, согласно инструкции
уровень шума	около 55 дБ	менее 55 дБА	менее 55 дБА
рабочий цикл	30 мин on/30мин off	20 мин on/40мин off	30 мин on/30мин off
насадка для промывания носа	опционально	-	-
вес	1300 г	1400 г	630 г
размеры	167x106x164 мм	230x165x140 мм	165x107x66 мм
гарантия	2 года	2 года	2 года

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОЛОКОУТСОСЫ

22



GM-10

не содержит
бисфенол А



GM-20

не содержит
бисфенол А

2-стадийное
сцеживание



GM-30

не содержит
бисфенол А

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОЛОКООТСОСЫ

23

модель	GM-10	GM-20	GM-30
тип	ручной	ручной	электрический
2-стадийное сцеживание		+	
регулируемая сила всасывания		+	+
быстрое сцеживание большого количества молока		+	+
эргономичная форма ручки	+	+	
подходит для бутылочек с широким и узким горлом	+	+	+
мягкая силиконовая мембрана для максимального комфорта	+	+	+
безболезненное и ускоренное сцеживание	+	+	+
имитация сосания груди младенцем	+	+	+
не содержит бисфенол А	+	+	+

КОНТАКТЫ

24

FREICARE SWISS AG

Блэк Офис, Унтерлеттенштрассе 14,
9443 Виднау, Швейцария
тел.: + 41 71 855 07 55
info@freicare.ch

FREICARE USA, LLC

Голливудский бульвар, 4000,
офис 555-Сауз, Голливуд, FL 33021
Тел.: 1-888-MED-7552
usa@medpack-swiss.com

Для получения более детальной
информации, пожалуйста,
посетите наш сайт:

dr-frei.com



Спасибо за внимание!

dr-frei.com